



FUNCTIONAL ARMCHAIR

FREJA 238

Freja 238 is a stepless and adjustable functional armchair with a metal frame. It has high comfort and is easy to use. The armchair has been developed for environments with high demands on cleanliness. For example, nursing homes and in care and social care.

Freja 238 kommer med avtagbart tyg i sits och rygg, samt har glipa mellan sits och rygg, vilket underlättar rengöring. Den kan även beställas med konstläder som inte behöver eftertorkas vid desinficering.


DIMENSIONS

Height	117 cm
Width	57 cm
Depth	79 cm
Seat height	48 cm
Seat depth	50 cm
Höjd armledare	65 cm



Any NCS-color available as an option on this product.

VIEWS

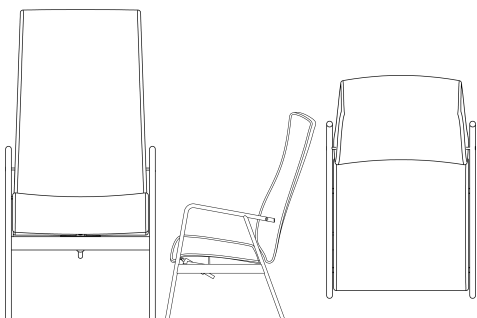

ADDED VALUE

- Developed for environments with special hygiene requirements
- High seating comfort and infinitely adjustable
- Gap between seat and back for best hygiene
- Removable upholstery
- Tested for 160kg

ACCESSORIES

- Rubber fabric/hospital fabric
- Adjustable neck pillow

RECYCLING

- Removable upholstery

NC Nordic Care AB

Box 30 573 35 Tranås Sweden
 +46(0)140-38 40 60, info@ncnordiccare.se
 nc nordiccare.se



LEATHER

If you take care of the leather in the right way, it will become more beautiful over the years.

- Leather is heat sensitive. Therefore, direct sunlight and close contact with heating elements should be avoided.
- Vacuum the furniture to remove loose dirt and dust.
- Wipe the leather with a slightly damp cloth and a mild soapy solution can be used for cleaning.
- Water-based leather care products extend the lifespan.

METAL

- For regular cleaning, use a lightly moistened cloth with a mild detergent without solvents or abrasives.
- For heavily soiled surfaces, a cloth moistened with alcohol can be used.
- Disinfection can be done with alcohol if the surface is dried afterwards.

FABRIC

- Removable and washable fabrics are washed according to washing instructions. These are sewn with a shrink seam, wash before use for optimal fit.
- Vacuuming with a soft nozzle is often sufficient for cleaning.
- Stains should always be removed as quickly as possible. In most cases, wiping with a damp cloth is sufficient, for more difficult stains, a pH-neutral detergent or a foam detergent for professional use can be used.
- Always use white cloths and avoid wetting a woolen fabric to a greater extent, as this risks remaining stains.
- If necessary, a foam detergent can also be used for a more thorough cleaning if this is allowed in the fabric's specification.